

S8 Escape™ II con tecnología Easy-Breathe

Descubra el silencio

El S8 Escape™ II es el equipo CPAP básico de la S8™ Serie II de ResMed, y ofrece los siguientes nuevos beneficios:

- **Nuevo funcionamiento silencioso como un susurro**, con un nivel de ruido 60% más bajo que antes
- **Nueva tecnología Easy-Breathe**: novedoso sistema de tratamiento revolucionario de ResMed
- **Función APE (EPR™) nueva y mejorada, con tecnología Easy-Breathe** para que el paciente respire con mayor comodidad
- **Descarga de información de cumplimiento basada en el uso** para realizar un seguimiento preciso del paciente
- **Tarjeta de datos**: función estándar incluida para transferir datos de ida y de vuelta con facilidad

Motor silencioso como un susurro

El nuevo motor con diseño sofisticado de ResMed crea un nuevo estándar de comodidad y tratamiento silencioso para el sector, al ofrecer un rendimiento superior con menor esfuerzo y al mismo tiempo disminuir considerablemente el ruido generado por el equipo. Al reducir el ruido, la tecnología Easy-Breathe permite que los pacientes y sus parejas duerman en paz durante toda la noche.

Tecnología Easy-Breathe

La tecnología Easy-Breathe combina un nuevo software, un motor más silencioso y una función APE mejorada para suministrar la máxima comodidad y un sueño silencioso durante la noche.

Alivio de presión para poder respirar de modo más natural

Gracias a la función APE mejorada con tecnología Easy-Breathe de ResMed, el S8 Escape II ofrece alivio de presión suministrada con una forma de onda suave que se asemeja a la respiración del paciente. El S8 Escape II con tecnología Easy-Breathe permite elegir entre tres niveles de APE diferentes, con lo cual brinda comodidad personalizada para que el paciente tenga la sensación de respirar naturalmente.

¿Por qué recetar APE con tecnología Easy-Breathe?

Los equipos CPAP que ofrecen alivio de presión no son todos iguales. La función APE con tecnología Easy-Breathe de ResMed está respaldada por estudios clínicos en los cuales se ha demostrado que tiene la misma eficacia desde el punto de vista clínico que la tecnología CPAP fija tradicional, pero que es mucho más cómoda. 79% de los pacientes prefieren el APE a la CPAP tradicional.¹



La S8 Serie II de ResMed es la gama de productos más pequeños y silenciosos del mercado e incluye los equipos S8 Escape II, S8 Elite™ II, S8 AutoSet™ II y VPAP™ Auto.

LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA S8 ESCAPE II INCLUYE ASIMISMO:

- **Recordatorios recurrentes:** configurados para fechas y períodos de repetición específicos
- **Opciones flexibles de manejo del paciente:** software ResScan™ para el manejo del paciente y tarjeta de datos ResScan con conectividad USB directa para controlar el tratamiento, determinar la presión que el paciente necesita y solucionar problemas de modo rentable.

EL CONJUNTO DE FUNCIONES DEL S8 ESCAPE II TAMBIÉN INCLUYE:

- Tres valores de APE para que el paciente respire con más comodidad
- Datos integrales de cumplimiento
- Smart Data™ para brindar información acerca del tratamiento del paciente
- Ajuste automático de la altitud
- Integración opcional con el humidificador térmico HumidAire 3i™
- Monitoreo del cumplimiento en cada respiración
- Entrada de 12 V ó 24 V de CC por medio del transformador DC-12 de ResMed

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rendimiento

Límites de presión de funcionamiento: de 4 a 20 cm H₂O

Almacenamiento de datos

Los datos incluyen: uso

Por medio de la tarjeta de datos ResScan: 180 sesiones de datos resumidos

Por medio del cable de la PC: 365 sesiones de datos resumidos

También es posible acceder a los datos por medio del menú del visor

Dimensiones (altura x ancho x profundidad)

118 mm x 164 mm x 145 mm (4,6 pulgadas x 6,5 pulgadas x 5,7 pulgadas)

Peso

1,4 kg (3,09 lbs)

Nivel sonoro

La presión acústica radiada está medida a $< 26 \pm 2$ dBA, a 10 cm H₂O y 1 m según la norma ISO 17510-1

Margen de entrada de la fuente de alimentación:

100–240 V CA, 50/60 Hz

12 V ó 24 V CC por medio del transformador DC-12 de ResMed 110 V CA, 400 Hz

Consulte el manual del usuario para obtener información acerca del consumo de potencia correspondiente a las condiciones de tratamiento habituales

Construcción de la carcasa

Termoplástico de ingeniería ignífuga

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento: de +5 °C a +36 °C (de 41 °F a +97 °F)

Filtro de aire

Dos capas de fibra de poliéster no entrelazada, con unión de polvo

Tubo de aire

Plástico flexible de 2 m de largo

Clasificación:

Clase II (doble aislamiento)


Tipo CF IPX1

Parte 15, Clase B*, de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) de EE.UU.

* Consulte al departamento médico de la aerolínea antes de utilizar el equipo en una aeronave.


Nota: El fabricante se reserva el derecho de modificar las presentes especificaciones sin previo aviso.

Comparación del sonido

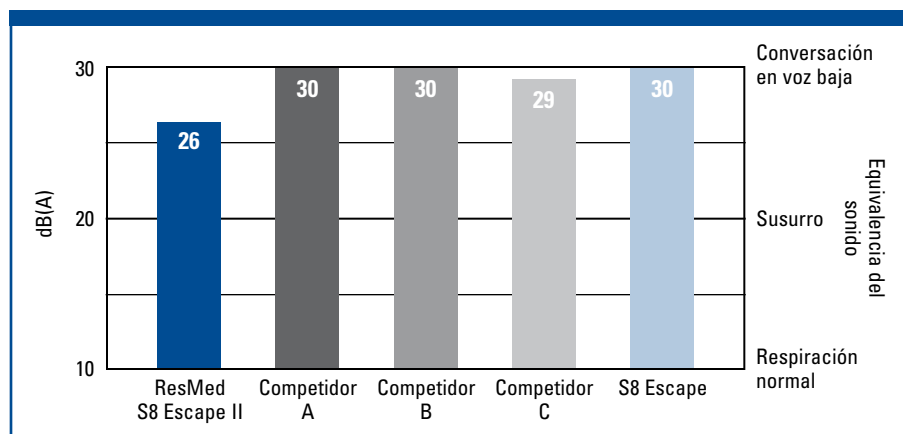

Ruido radiado medido a 10 cm H₂O y 1 m de distancia según la norma ISO 17510-1 (medido el 12/7/07).

APE con tecnología Easy-Breathe

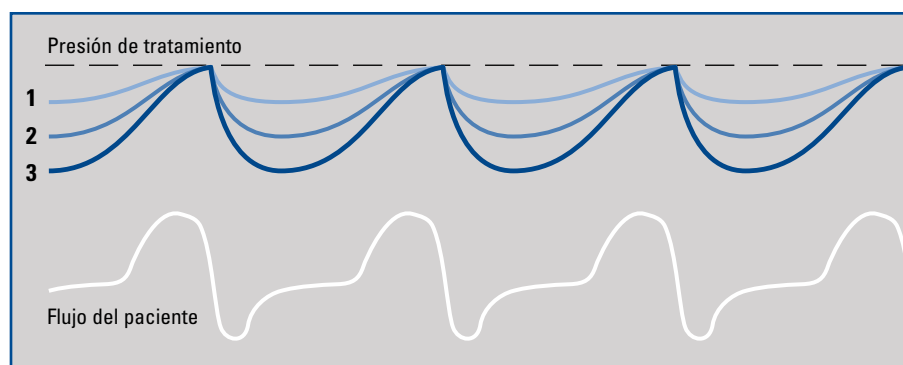

Tres valores de APE: 1 cm H₂O, 2 cm H₂O y 3 cm H₂O de alivio de la presión CPAP.

CÓDIGOS DE LOS PRODUCTOS

S8 Escape II

Américas

33051

HumidAire 3i

Américas

33906